




Radiofrequência

Osteoma Osteoide e Metástase Óssea

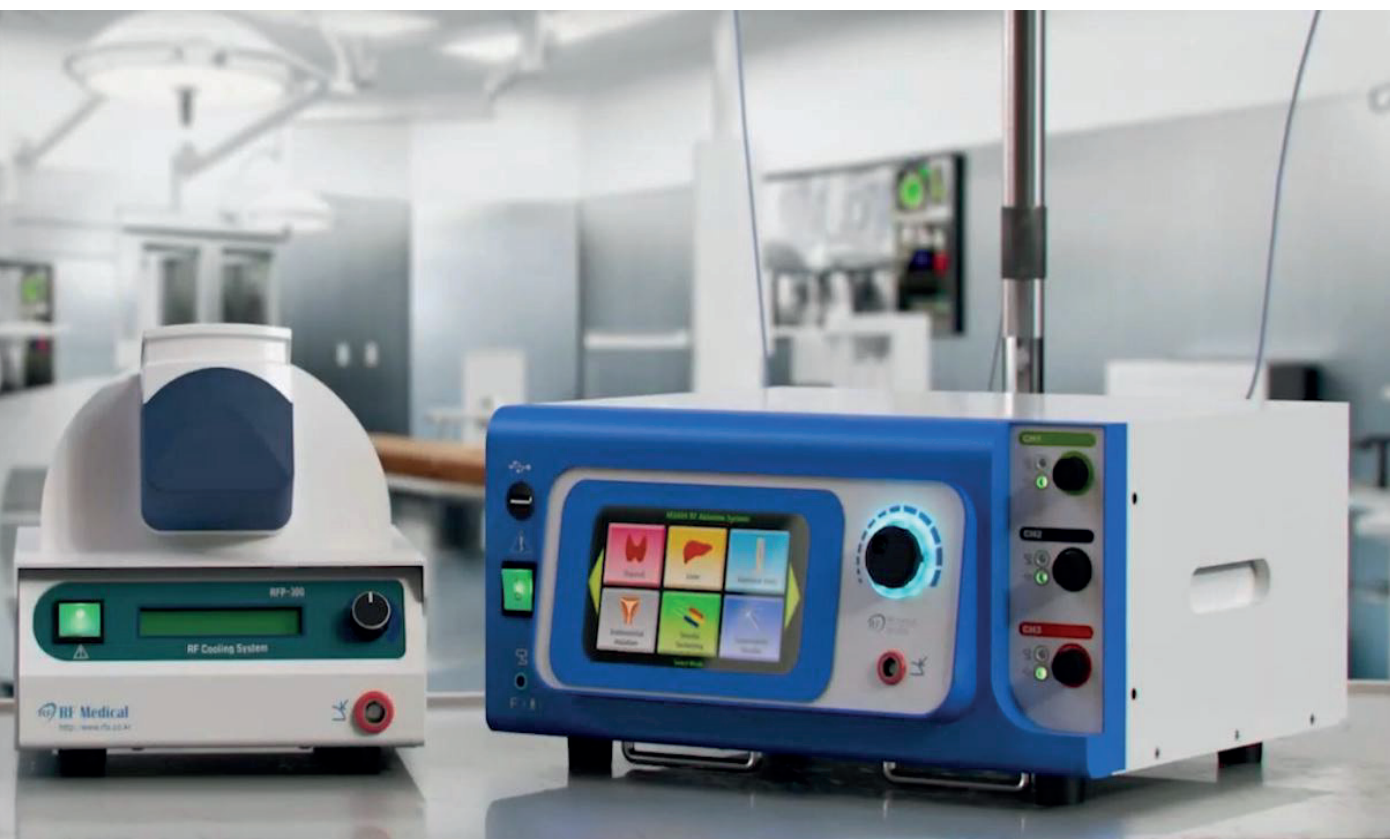

GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA M-3004 E V-1000

Os geradores M-3004 e V-1000 são os sistemas de ablação mais avançados do país com programas e algoritmo dedicado e específico para Osso. Isso fará com que o sistema identifique a característica do tecido e garanta a melhor entrega de energia a fim de alcançar os melhores resultados.



Outras aplicações:



Mioma
Adenomiose



Tireoide



Fígado



Rim



Pulmão



Osteoma
Osteoide



Metástase
Vertebral



Ronco
e Apneia



Ressecção
Hepática

CÂNULA VTP

INTRODUTOR PARA ABLAÇÃO ÓSSEA

Sistema Exclusivo

O Introdutor VPT é projetado para ablações de tecido ósseo por Radiofrequência. Seu revestimento de Teflon não permite a passagem de corrente elétrica pelo introdutor, evitando assim seu aquecimento e auxiliando na prevenção de queimaduras acidentais.

Ergonômico
Seguro
Resistente

Exclusivo
Revestimento de TEFLON



Componentes



Cânula



Estilete



Empurrador

BMDT


DISPOSITIVO PARA ABLAÇÃO ÓSSEA

Com o BMDT é possível monitorar a temperatura do centro da lesão com o termopar fixo e também saber a extensão da zona de ablação através do termopar móvel.


Sensores duplos de temperatura na superfície do dispositivo (um fixo e o outro móvel).

Orifício na ponta do dispositivo para injetar soro fisiológico direto na lesão.

EXCLUSIVO

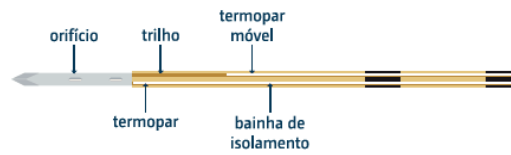


O BMDT foi projetado para minimizar a limitação de visualização da imagem durante a ablação em tecido ósseo. Com o segundo termopar o médico poderá movimentar durante a ablação de 0,5 à 4,0 e saber qual a temperatura em cada ponto em relação ao centro, sabendo assim quanto a ablação já expandiu.

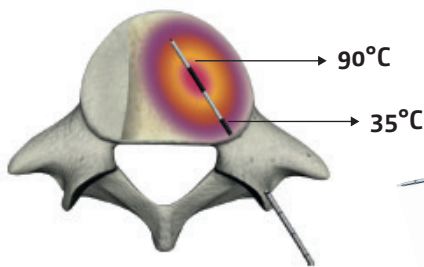

Ponta ativa fixa

90°C - Termopar fixo no centro da ablação

35°C - Termopar móvel mostrando a temperatura a 2 cm do centro

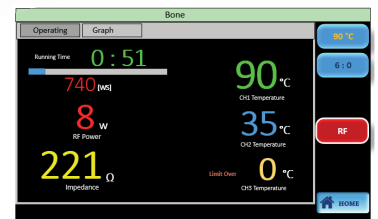

V-TIPTM

EXCLUSIVO

Possibilidade de realizar múltiplas ablações de diferentes tamanhos utilizando apenas um único dispositivo.

- Individualização no tratamento
- Maior preservação de tecido saudável
- Flexibilidade no tratamento de lesões
- Ponta ativa ajustável de 0,5 à 4,0 cm

Ajuste o tamanho da zona de ablação de acordo com o tamanho das lesões a serem tratadas.



Ponta ativa ajustável
0,5 cm a 4,0 cm



Fígado




Rim



Pulmão



Osteoma
Osteoide e
Metástase Óssea

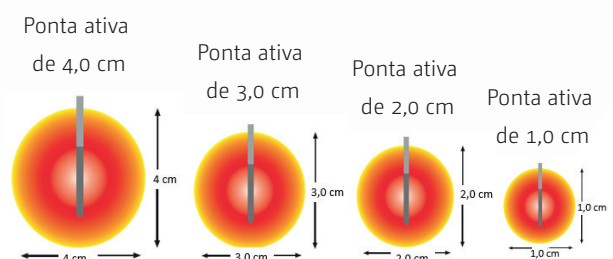

⚠ Os tamanhos das ablações podem variar de acordo com o tipo e localização do tumor.



Política de Qualidade

Ser uma empresa parceira, confiável e competente para todos os nossos clientes e colaboradores. Reconhecer as suas expectativas, agir imediatamente e aumentar continuamente a sua satisfação através da qualidade dos nossos produtos e sistema de gestão da qualidade seguindo os requisitos legais aplicáveis.

www.surgicalline.com.br

Rua Pereira Stéfano, 144 - 12º andar
Saúde, São Paulo - SP
Cep: 04144-070
Tel: (11) 4053-9640

Distribuidor local:



Fabricado por:



Distribuição master:

